

Dierenweegschalen

Advanced Measuring Instruments


Van klein tot grote dieren.



ADVANCED MEASURING
— INSTRUMENTS —

Zandstraat 4D B-9270 Laarne Tel: +32 9 273 52 09

www.aminstruments.be – Info@am-instruments.be



„Gebruiksvriendelijke en praktische dierenweegschalen voor de exacte gewichtsbepaling van huisdieren, kleinvee en groot vee.
Zeer betrouwbaar voor dagelijks gebruik in de praktijk”


“Een tevreden klant”

Neem een kijkje op

www.aminstruments.be



ADVANCED MEASURING
— INSTRUMENTS —

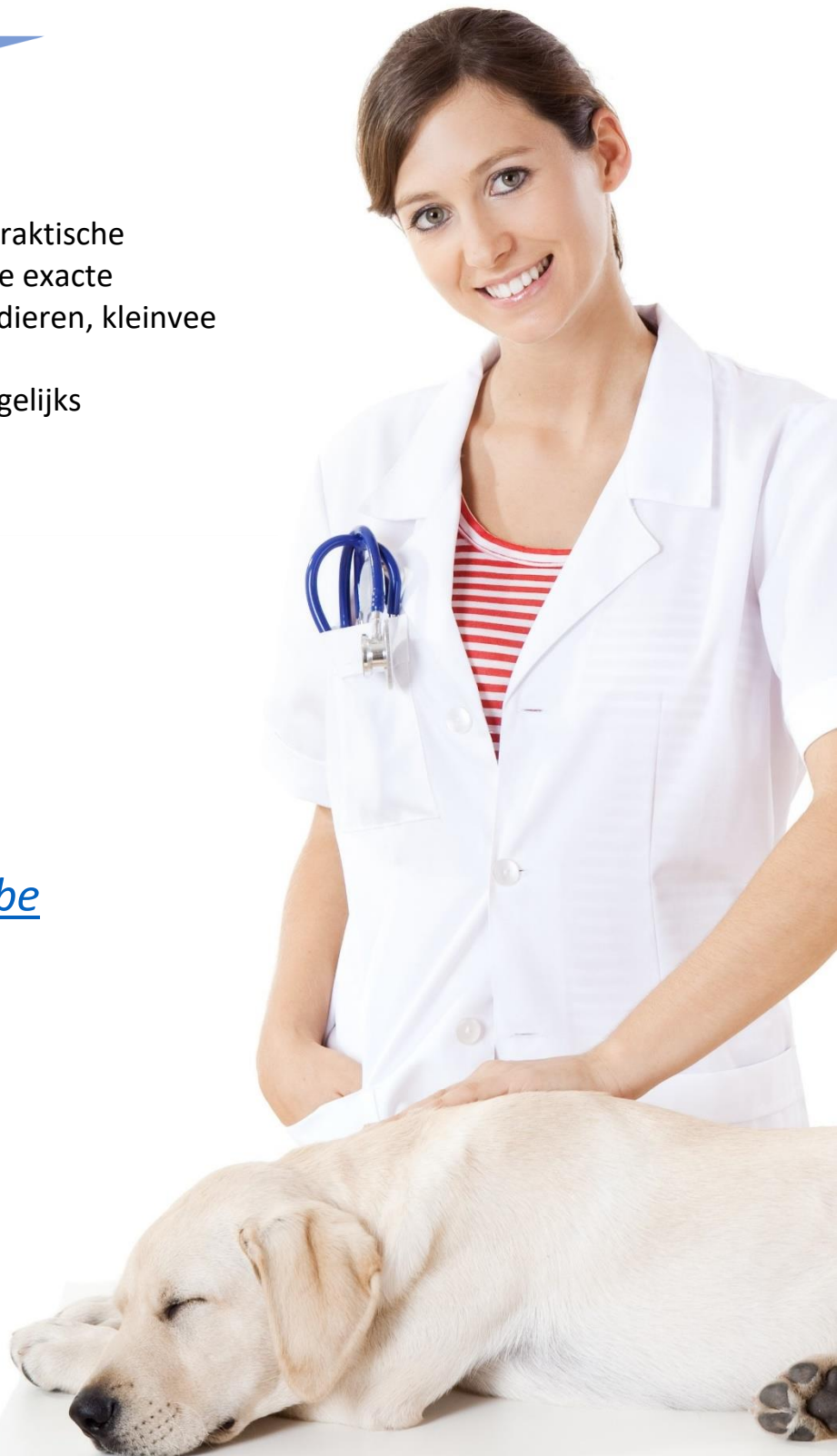

AMI BV. Levert dierenweegschalen voor het wegen van huisdieren en kleinvee zoals konijnen, katten, honden, slangen, schapen, paarden, runderen enz.



Onze dierenweegschalen zijn uitermate geschikt voor de gewichtscontrolle van dieren en of voedders. De weegschalen zijn flexibel, robuust, ergonomisch, goed leesbaar en heel gebruiksvriendelijk.

Van weegschalen voor kleine dieren, die ook ideaal zijn voor het wegen van voer in het kader van dieetplannen. De hang- en kraanweegschalen voor het mobiel wegen van dieren of zakken. En ook hoog belastbare vloerweegschaal voor dieren tot 3 ton. Ons assortiment van dierenweegschalen van biedt een uitgebreide keuze.

Handige functies in de elektronica ondersteunen de dierenarts of dierenhouder bij zijn dagelijks werk met het dier. Onze weegschalen beschikken steeds over een dierenweegprogramma zodat het gewicht ook stabiel weergegeven als het dier zich beweegt tijdens het wegen.

En dankzij de praktische HOLD-functie blijft het vastgestelde gewicht op het display staan, ook als het dier al van de weegschaal af is.

De weegschalen kunnen statisch in de praktijk of mobiel bij de dierenhouder, in het dierenverblijf of op het terrein gebruikt worden. Een voedingsadapter of batterijen kunnen voorzien worden.

Bij her kalibraties of herstelling kan u ook beroep doen op onze diensten.



Kleine weegschaal voor kleine en middelgrote dieren

Universele weegschaal voor kleine dieren voor vaste toepassingen



Kenmerken:

- ✓ Plateauweegschaal voor het wegen van dieren
- ✓ Weegplateau edelstaal, afneembaar
- ✓ Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- ✓ Dierweegprogramma: Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang "bevroren" tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt. Zo blijft genoeg tijd over om aan de kleine patiënt te besteden en daarna in alle rust de weegwaarde af te lezen
- ✓ Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- ✓ Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- ✓ Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen

Technische gegevens:

- ✓ Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- ✓ Afmetingen weegplateau:
310x305x65 mm, groot afgebeeld
550x550x65 mm
945x505x65 mm
- ✓ Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x45 mm
- ✓ Kabellengte afleesinrichting ca. 180 cm
- ✓ Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1.5V AA, niet meegeleverd, bedrijfsduur ca. 60 h
- ✓ Netadapter (extern) standaard
- ✓ Nettogewicht ca. 4kg/13,5 kg



Optioneel:

- ✓ Wandhouder voor wandmontage
- ✓ Statief om de indicator hoger te plaatsen ca 1000mm

Model	Weegbereik	Aflezing(d)	Weegplateau	Prijs (€)	Optioneel:kalibratie certificaat
EOB 15K5	15 kg	5g	315x305mm	150,-	72€
EOB 35K10	35 kg	10g	315x305mm	150,-	72€
EOB 60K20L	60 kg	20g	550x550mm	320,-	72€
EOB 150K50	150 kg	50g	315x305mm	150,-	72€
EOB 150K50XL	150 kg	50g	945x505mm	375,-	72€
EOB 300K100L	300 kg	100g	550x550mm	320,-	72€
EOB 300K100XL	300 kg	100g	945x505mm	375,-	72€

Grote dierenweegschaal voor middelgrote dieren

Roestvrij stalen dierenarts model voor middelgrote dieren voor vast en mobiele gebruik.

VERRIJDBAAR met handvat en wielen !



Kenmerken:

- ✓ Robuuste roestvrij stalen plateauweegschaal voor het wegen van grotere dieren
- ✓ Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- ✓ De geringe hoogte vergemakkelijkt het opstappen
- ✓ Dierweegprogramma: Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang "bevroren" tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt. Zo blijft genoeg tijd over om aan de patiënt te besteden en daarna in alle rust de weegwaarde af te lezen
- ✓ Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- ✓ Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen, instelbaar
- ✓ Rubberen antislipmat standaard
- ✓ Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- ✓ Weegschaal kan met behulp van 2 wielen en 1 handvat gemakkelijk worden verplaatst en ruimtebesparend worden opgeborgen

Technische gegevens:

- ✓ Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- ✓ Afmetingen weegplateau: 950x500x58 mm,
- ✓ Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x45 mm
- ✓ Kabellengte afleesinrichting ca. 2.7m
- ✓ Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1.5V AA, niet meegeleverd, bedrijfsduur ca. 60 h
- ✓ Netadapter (extern) standaard
- ✓ Nettogewicht ca. 22kg

Optioneel:

- ✓ Wandhouder voor wandmontage
- ✓ Statief om de indicator hoger te plaatsen ca 1000mm


Model	Weegbereik	Aflezings(d)	Weegplateau	Prijs (€)	Optioneel:kalibratie certificaat
EOS 150K50XL	150 kg	50g	950x500x58 mm	385,-	110€
EOS 300K100XL	300 kg	100g	950x500x58 mm	385,-	110€



Paardenweegschaal en Veewegers grote dieren

Onze WPT/4I-serie vee weegschalen wordt gebruikt voor snelle en nauwkeurige gewichtsbepaling van runderen en varkens.

✓ **Oplossing voor het meten van alle kuddes vee.**

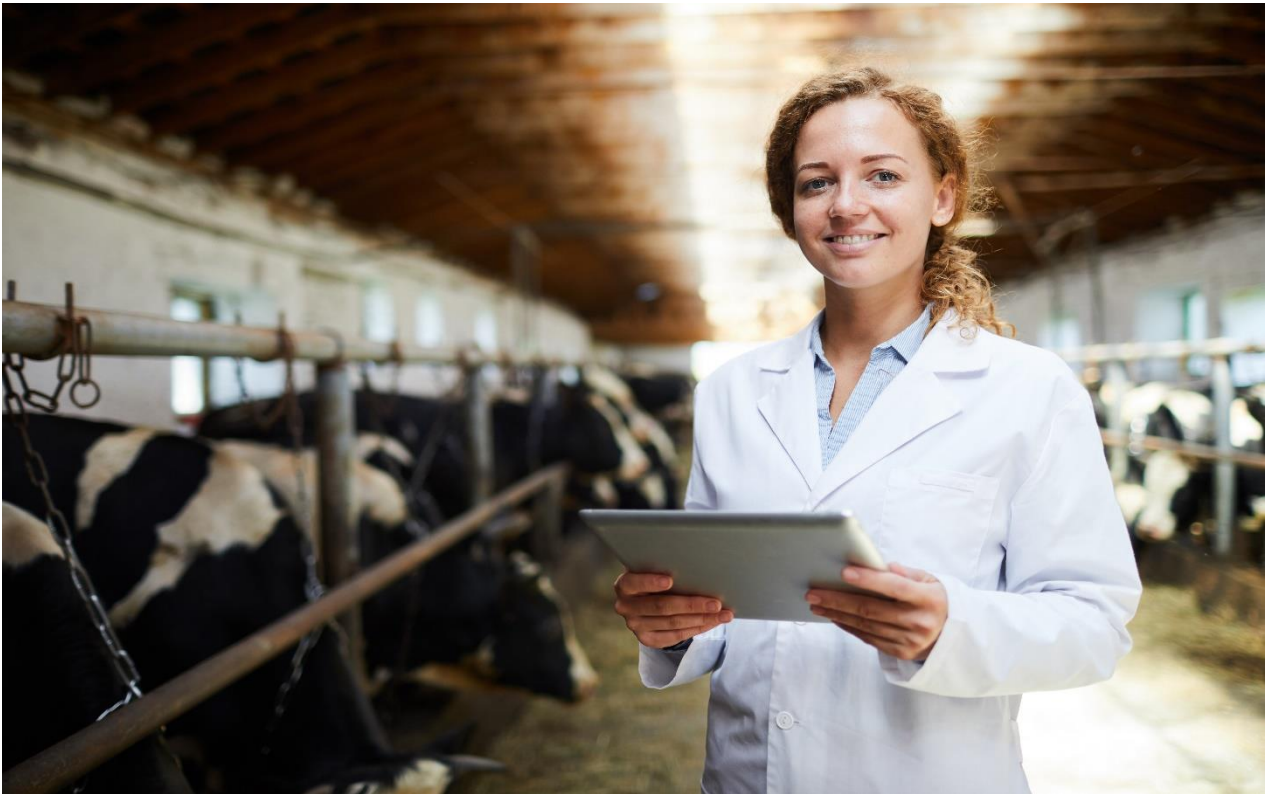

Laag hekwerk





Hoog hekwerk



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



Animal weighing

Kenmerken:

- ✓ mogelijkheid van meervoudige tarreren in alle meetbereiken.
- ✓ Het weegproces wordt uitgevoerd met gesloten ingangspoort.
De hoogte van het hek is afhankelijk van de afmetingen van het weegplatform.
- ✓ De weegschaal is voorzien van een indicator PUE C/31H serie in roestvrijstalen behuizing.
- ✓ De indicator bestaat uit een Lcd-display met achtergrondverlichting en functietoetsen.
- ✓ Het weegplatform en de indicator zijn verbonden met een lange kabel voor eenvoudige montage van de indicator aan een muur.
Speciale software met verschillende dempingsfilters maakt een stabiele en nauwkeurige massaaflezing mogelijk, zelfs als de dieren op het platform bewegen.

Technische gegevens:

- ✓ 2000kg weegcapaciteit
- ✓ 1kg aflezing
- ✓ Afmetingen weegschaal 1x2m
- ✓ Variabele hoogte van hekwerk
- ✓ IP 67 Bescherming tegen water en vervuiling



Scan mij voor meer info



Paardenweegschaal met weegvermogen van 1500kg



Kenmerken:

- ✓ weegvermogen 1500 kg, indeling per 0,5 kg
- ✓ Weegoppervlak 2035 x 1000 mm
- ✓ lichte constructie voor eenvoudig transport; weegplateau (delen) uitgevoerd in aluminium
- ✓ bovenplaat van het weegplateau is voorzien van zwaar uitgevoerde rubberen antislipmat, geluidsdempend
- ✓ uitgevoerd met handgrepen onder het weegplateau voor eenvoudige verplaatsing
- ✓ geringe plateauhoogte van 60 mm zodat het paard gemakkelijk op- en van het weegplateau kan stappen
- ✓ voorzien van 4 RVS load cells, beschermingsklasse **IP68**
- ✓ standaard uitgevoerd met separate weegindicator in kunststof behuizing met verlicht LCD-display

